
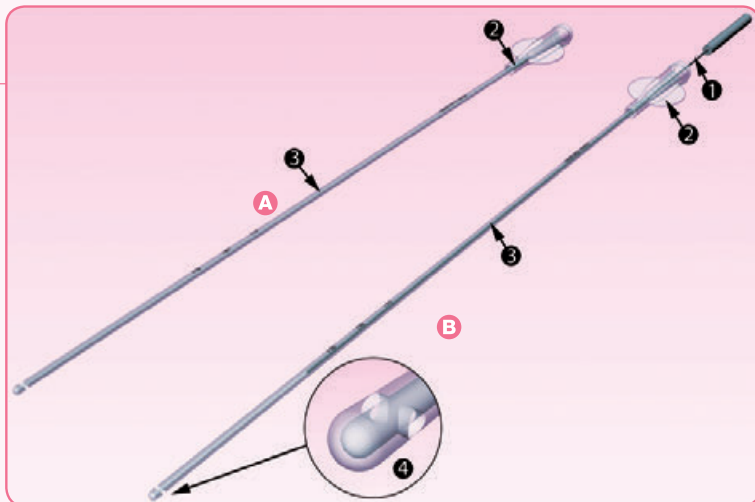


Artificial Insemination (AI)

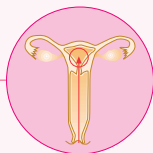

A AINSEWHITE **B** AINSEGREY

Cannula di Inseminazione Intra Uterina Intrauterine insemination catheter

Per un facile trasferimento del seme preparato nella cavità uterina, nelle procedure di IA. Le cannule hanno punta arrotondata (4), due fori laterali e sono provviste di centimetratura (3). La trasparenza del materiale permette di verificare il buon esito del deposito. Un raccordo luer lock funge da impugnatura e permette una connessione sicura alla siringa per l'iniezione dello sperma. Le due alette laterali (2) allineate con i due fori sulla punta permettono di orientarsi durante il posizionamento.

Disponibile in 2 versioni:

- **AINSEWHITE (A)** Cannula morbida centimetrata senza mandrino;
- **AINSEGREY (B)** Cannula morbida centimetrata con mandrino in acciaio (1) per un inserimento facilitato. Sterilizzate a Raggi Beta per escludere ogni rischio di tossicità causato da eventuali residui di Ossido di Etilene. **AINSEWHITE** e **AINSEGREY** non sono da utilizzarsi per fecondazione in vitro e trasferimento intratubarico di gameti.

Realizzati test di embriotossicità (MEA) e controllo delle endotossine batteriche (LAL).

For easy transfer of washed sperm into the uterine cavity, in Artificial Insemination procedures. Centimeter-marked catheters (3) with rounded tip (4) and double side-eyes. Material transparency allows visual proof of successful transfer. A luer lock adapter serves as finger grip and allows a safe syringe connection for sperm injection. The two orientation wings (2) aligned with the double side-eyes enhance accurate placement of the catheter. Available in 2 versions:

- **AINSEWHITE (A)** IUI centimetre-marked soft catheter without mandrel;
- **AINSEGREY (B)** IUI centimetre-marked soft catheter with steel mandrel (1) to facilitate insertion.

Beta irradiated to eliminate any risk of toxicity from residual contamination common with EtO.

AINSEWHITE and **AINSEGREY** are not intended for in vitro fertilization and Intra Fallopian tubes procedures.

AINSEWHITE and **AINSEGREY** are MEA (mouse embryo assay) and LAL (endotoxin) tested.

Scatola da 24 pezzi.

Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a raggi Beta e marcato CE.

24 pcs. per box.

Single packaged, single use, Beta sterilized and CE marked.

Cod. A	Cod. B	Descrizione - Description
770219	770220	Ø esterno 2,0 mm - O.D. 2.0 mm Ø interno 1,2 mm - O.D. 1.2 mm lung. 195 mm - length 195 mm senza impugnatura - without handle

