


Ovum pick-up

MONOLUME

Ago per prelievo ovociti e aspirazione cisti ovariche

Needle for oocyte/
ovarian cyst aspiration

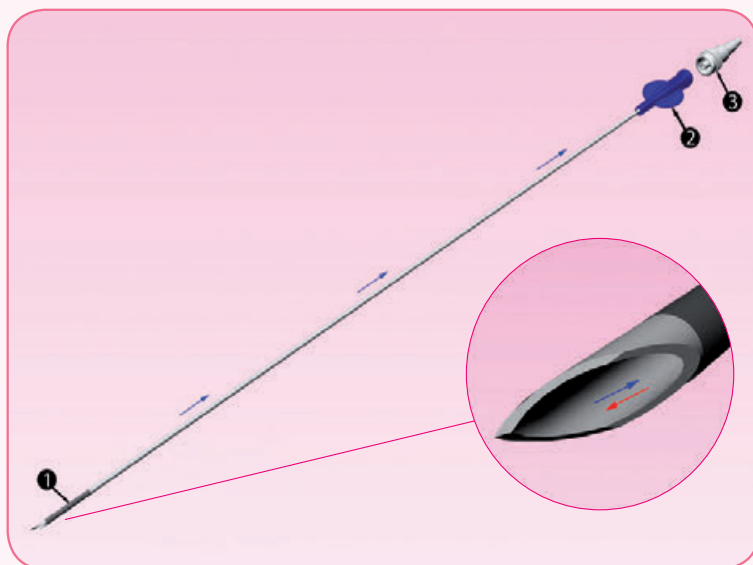

Per la raccolta atraumatica di ovociti nelle procedure di fecondazione in vitro. È anche indicato per l'aspirazione di cisti ovariche. Ago semplice a lume singolo composto da:

- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- un raccordo luer lock (2) che funge da impugnatura e permette una connessione sicura alla siringa;
- due alette laterali in linea con l'affilatura della punta che permettono all'operatore di orientarsi durante la fase di penetrazione.
- raccordo universale (3), che consente molteplici connessioni.

Per una facile identificazione: connettore azzurro per 16G e connettore trasparente per 17G.

Sterilizzato a Raggi Beta per escludere ogni rischio di tossicità causato da eventuali residui di Ossido di Etilene.

Realizzati test di embriotossicità (MEA) e controllo delle endotossine batteriche (LAL).

For atraumatic oocyte aspiration in IVF procedures. Recommended also for ovarian cyst aspiration. Single lumen needle without tubing set. Echogenic tip with atraumatic bevel (1). A luer lock adapter (2) serves as finger grip and allows a safe syringe connection. The two orientation wings aligned with tip bevel aid the operator during penetration phase and increase tip control. Provided with universal adapter (3) allowing multiple connections. Colour coding for easy identification: light blue connector for 16G and white connector for 17G. Beta irradiated to eliminate any risk of toxicity from residual contamination common with EtO.

MONOLUME is MEA (mouse embryo assay) and LAL (endotoxin) tested.

| Cod. | Misura e lunghezza ago Needle size and length |
|--------|--|
| 770312 | 16 G x 330 mm |
| 770311 | 17 G x 330 mm |

Scatola da 10 pezzi.

Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a raggi Beta e marcato CE.

10 pcs. per box.

Single packaged, single use, Beta sterilized and CE marked.

